



















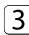


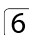

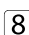


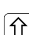
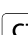

Software educativo para melhorar  
as habilidades visuais e visuo-motoras

## Atalhos de teclado e gestos em touch screen



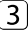








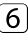






### Controle do programa

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
 + 		Informação	Lista de atalhos de teclado e gestos
 + 		Menu	Ao menu principal

### Dentro do exercício -

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		ESPAÇO	Iniciar tarefa / Confirmar tarefa
		ENTER	Iniciar / Parar o exercício
 + 		Preferences	Configurações do exercício atual
		1	1.a cor e padrão de fundo <i>Gesto: Alternar entre as duas cores de fundo</i>
		2	2.a cor e padrão de fundo <i>Gesto: Alternar entre as duas cores de fundo</i>
		3	Alterar o padrão de fundo <
		4	Alterar o padrão de fundo >
		5	Reduzir o tamanho do padrão de fundo
		6	Aumentar o tamanho do padrão de fundo
		7	Reduzir a distância do padrão de fundo
		8	Aumentar a distância do padrão de fundo
		0	Nenhum padrão de fundo
		Normal	Restaurar as configurações originais da tarefa
 +  + 		Normal	Restaurar as configurações originais do exercício

## Dentro do exercício –

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
 +  + 			Mover o fundo para a esquerda
 +  + 			Mover o fundo over para a direita
 +  + 			Mover o fundo para cima
 +  + 			Mover o fundo para baixo
 +  + 			Diminuir o movimento do fundo
 +  + 			Acelerar o movimento do fundo



## Individualização spot: objeto fixo

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Reduzir o objeto
		KEY UP	Ampliar o objeto
		KEY LEFT	Reduzir a opacidade do objeto
		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade do objeto
		Animação	Iniciar / Parar a animação <i>Cintilação (opacidade) -&gt; Stop -&gt; Cima / Baixo -&gt; Stop</i>
+		Sugestão	Mostrar o objeto pesquisado <i>Apenas tarefas com visualização</i>



## Individualização spot: objeto em movimento

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Diminuir o movimento
		KEY UP	Acelerar o movimento
+  +		KEY DOWN	Reduzir o objeto
+  +		KEY UP	Ampliar o objeto
		KEY LEFT	Reduzir a opacidade do objeto
		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade do objeto
		Animação	Iniciar / Parar a animação <i>Cintilação (opacidade) -&gt; Stop -&gt; Cima / Baixo -&gt; Stop</i>
		Start / Stop	Iniciar / Parar o movimento
		Direcção	Inverter o sentido do movimento
		Tipo	Alterar o tipo de movimento <i>stop + go -&gt; ioiô duro -&gt; ioiô suave -&gt; contínuo</i>
+		Sugestão	Mostrar o objeto pesquisado <i>Apenas tarefas com visualização</i>




















## Individualização spotPlus

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Reduzir os objetos procurados
		KEY UP	Ampliar os objetos procurados
		KEY LEFT	Reduzir a opacidade dos objetos procurados
		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade dos objetos procurados
		Animação	Iniciar / Parar a animação <i>Cintilação (opacidade) -&gt; Stop -&gt; Cima / Baixo -&gt; Stop</i>
+  +		KEY DOWN	Reduzir todos os objetos
+  +		KEY UP	Ampliar todos os objetos
+  +		KEY LEFT	Reduzir a opacidade de todos os objetos
+  +		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade de todos os objetos
+  +		Animação	Iniciar / Parar a animação de todos os objetos <i>Cintilação (opacidade) -&gt; Stop -&gt; Cima / Baixo -&gt; Stop</i>
+		Sugestão	Mostrar os objetos pesquisados <i>Apenas tarefas com visualização</i>



## Individualização zoom

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Zoom lentamente
		KEY UP	Zoom rapidamente
		KEY DOWN	Reduzir o objeto no final do zoom
		KEY UP	Ampliar o objeto no final do zoom
		KEY LEFT	Reduzir a opacidade do objeto
		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade do objeto
		Animação	Iniciar / Parar a animação <i>Cintilação (opacidade) -&gt; Stop -&gt; Cima / Baixo -&gt; Stop</i>
		Start / Stop	Iniciar / Parar o movimento
 + 		Sugestão	Mostrar o objeto pesquisado <i>Apenas tarefas com visualização</i>



## Individualização track

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Mover o objeto para baixo
		KEY UP	Mover o objeto para cima
		KEY LEFT	Mover o objeto para a esquerda
		KEY RIGHT	Mover o objeto over para a direita
		Animação	Iniciar / Parar a animação do objeto alvo
		Tipo	Alterar o tipo de linha <i>pontilhada -&gt; tracejada 1 -&gt; tracejada 2 -&gt; tracejada 3 -&gt; tracejada 4 -&gt; tracejada 5 -&gt; contínua</i>
+  +		KEY DOWN	Diminuir a espessura da linha
+  +		KEY UP	Aumentar a espessura da linha
+  +		KEY LEFT	Reduzir a opacidade da linha
+  +		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade da linha











## Individualização trace

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
		KEY DOWN	Mover o objeto para baixo
		KEY UP	Mover o objeto para cima
		KEY LEFT	Mover o objeto para a esquerda
		KEY RIGHT	Mover o objeto over para a direita
		Animação	Iniciar / Parar a animação do objeto alvo



## Individualização stimula

Tecla	Gesto	Descrição	Efeito
▼		KEY DOWN	Retardar o movimento
▲		KEY UP	Acelerar o movimento
◀		KEY LEFT	Reduzir a opacidade dos objetos
▶		KEY RIGHT	Aumentar a opacidade dos objetos
E		Efeito	Efeito especial
S		Start / Stop	Iniciar / Parar o movimento
D		Direcção	Inverter o sentido do movimento
⬆ + ctrl + ▼		KEY DOWN	stimula 8000: Reduzir o objeto <i>Apenas stimula 8000</i>
⬆ + ctrl + ▲		KEY UP	stimula 8000: Ampliar o objeto <i>Apenas stimula 8000</i>
⬆ + ctrl + ◀		KEY LEFT	NOC: Menos listras (listras estreitas) <i>Apenas NOC</i>
⬆ + ctrl + ▶		KEY RIGHT	NOC: Mais listras (listras largas) <i>Apenas NOC</i>

## Copyright

Todos os direitos são reservados. O conteúdo deste documento (textos, imagens, gráficos) não pode ser copiado, reproduzido ou alterado para fins comerciais ou ser colocado à disposição de terceiros sem prévio aviso e autorização do autor.